



Controleer op tekenen van plotselinge hartstilstand:

Niet reageert Niet normaal ademt


1. TREKKEN

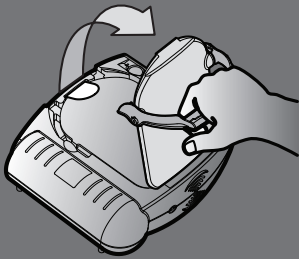

2. AANBRENGEN

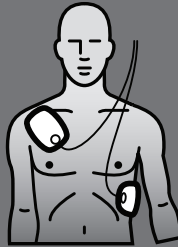

3. DRUKKEN

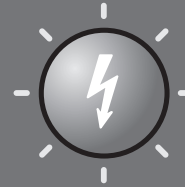

BEKNOPTE NASLAGGIDS





BEKNOPTE NASLAGGIDS


Gedetailleerde Aanwijzingen



Te starten: Trek aan handvat. Verwijder deksel.

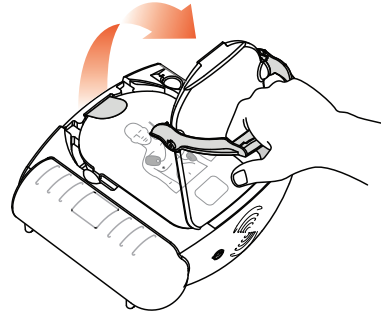
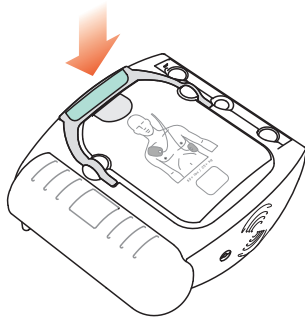


Verwijder de kleding van de borst van de patiënt.
Maak de huid schoon en droog deze zo nodig af.


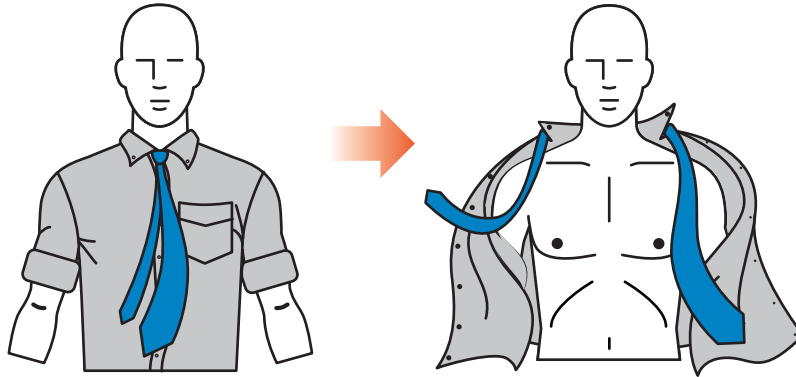


2



Trek het beschermfolie los en need de elektroden uit.

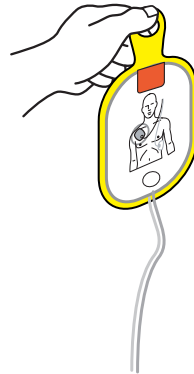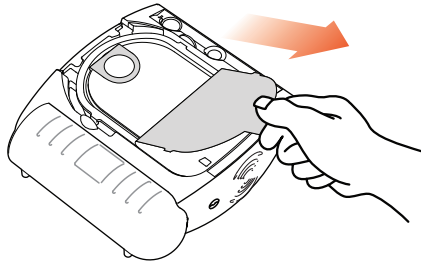

Trek de elektroden van de gele kunststof onderlaag.

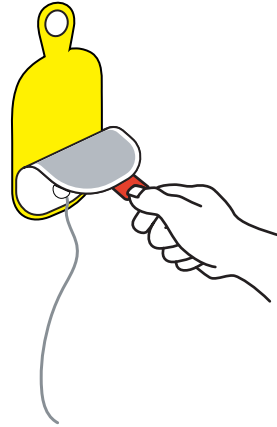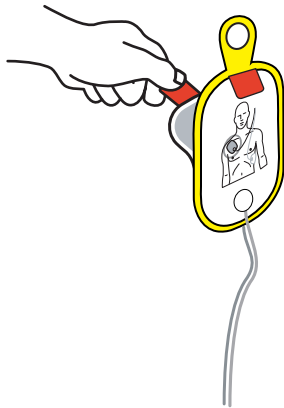


Breng de elektroden precies zo aan als op de plaatjes.

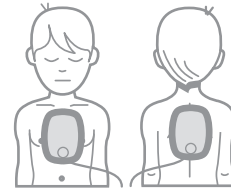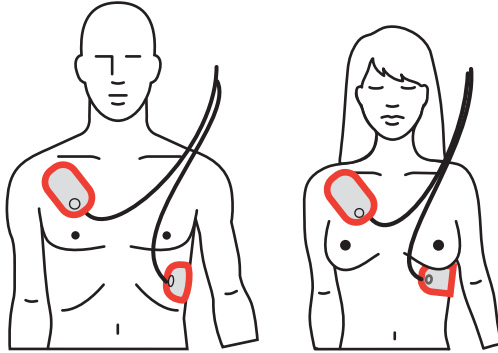


(0-8 jaar) < 25 kg




Analyse in uitvoering ... Raak de patiënt niet aan!

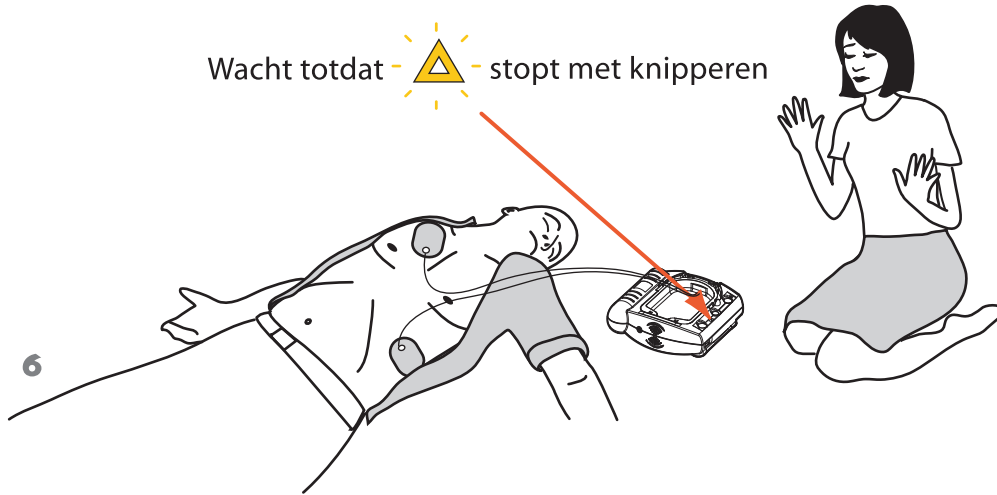

Om een shock toe te dienen: Druk op de knipperende oranje schoktoets. Raak de patiënt niet aan.

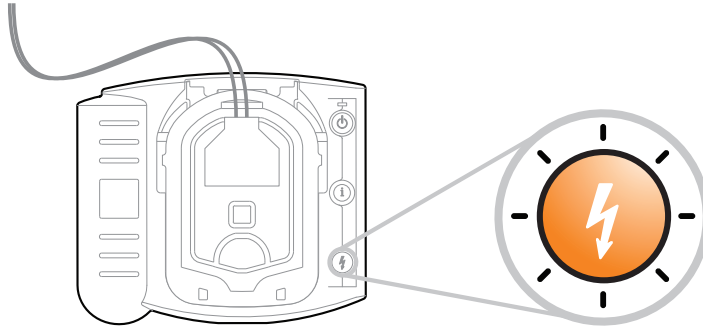


Voor hulp bij reanimatie:
Druk op knipperende blauwe knop.

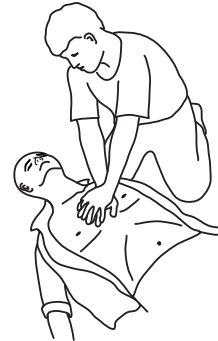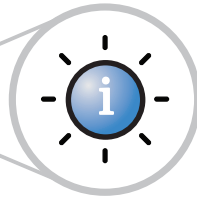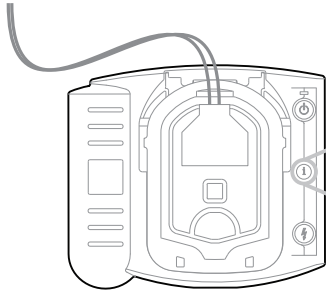

8 Knijp neus dicht, kantel hoofd achterover • voer 30 compressies uit • beadem tweemaal vol

Als de cassette vervangen moet worden:
Verschuif de vergrendeling.

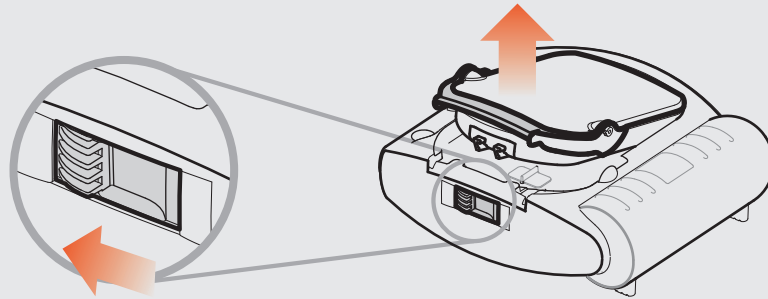

Gedrukt in de VS

Philips Medical Systems
Seattle, WA 98121

Copyright © 2006
Philips Electronics North American Corp

M 5 0 6 6 - 9 7 8 0 3



0 1 1 9 8 2 - 0 0 0 4

PHILIPS